




Performance & Lifestyle

Ginocchiera Post-Operatoria X-Act ROM

Protezione mirata

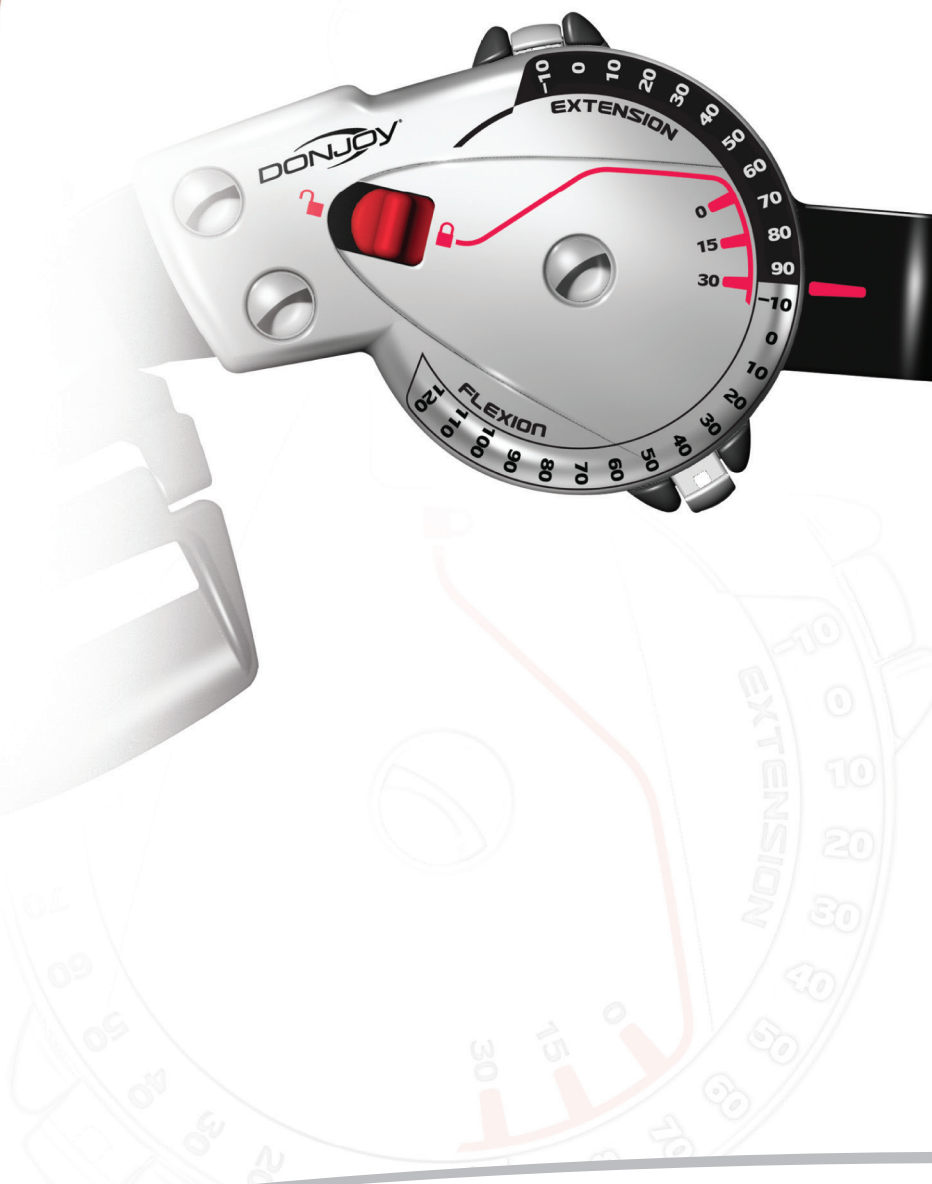

La nuova ginocchiera post-operatoria X-Act ROM di DonJoy garantisce comfort, aderenza e funzionalità di livello superiore, migliorando le condizioni di guarigione dopo l'intervento.

Indicazioni

Immobilizzazione e controllo del range di movimento (ROM) a seguito di interventi chirurgici ai legamenti crociato anteriore (LCA), crociato posteriore (LCP), collaterale laterale (LCL) e collaterale mediale (LCM) e di interventi di riparazioni del menisco.

Resistenti snodi in alluminio per una protezione mirata


- I nuovi, resistenti snodi in alluminio ottimizzati garantiscono una protezione mirata e un controllo del range di movimento (ROM) a incrementi di 10°:
 - Estensione da -10° a 90°
 - Flessione da -10° a 120°
 - Semplice meccanismo quick-lock (blocco rapido) a 0°, 15° e 30°

Nuove Caratteristiche

Le fibbie si allacciano velocemente e ruotano intorno alla gamba garantendo la massima aderenza in tempi minimi.



Le fibbie con clip a pressione si inseriscono rapidamente in posizione con uno scatto.

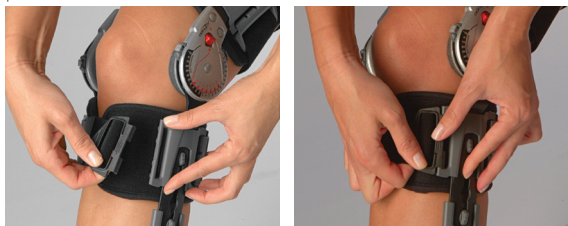

Fibbie a sgancio rapido per una facile applicazione

- Le fibbie rotanti a sgancio rapido sono semplici da allacciare e garantiscono, in un istante, un'ottima aderenza intorno alla gamba.



X-Act ROM è il più leggero tutore post-operatorio di DonJoy. Oltre a semplicità e rapidità di applicazione, garantisce comfort, massima aderenza intorno alla gamba e protezione mirata durante la guarigione.

Meccanismo Tele-Fit per un'aderenza ottimale

- Consente la regolazione indipendente della lunghezza delle cinghie prossimali e distali, per un'aderenza universale del tutore per ginocchio X-Act ROM.
- Regolazione telescopica da 48 cm a 63,5 cm per l'adattamento a pazienti di varie corporature.
- Tutte e 4 le aste scorrevoli si estendono in modo indipendente per consentire il posizionamento delle cinghie lontano dal sito chirurgico.

Rivestimento interno in poliuretano autoadesivo per una maggiore stabilità del tutore

- Esclusivo rivestimento interno autoadesivo in poliuretano dotato di punti di contatto tra il tutore e la gamba atti ad aumentarne l'aderenza.



Ginocchiera Post-Operatoria X-Act ROM

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE
11-2151-9	Ginocchiera post-operatoria X-Act ROM	Universale*

ACCESSORI

25-6755	Kit di bloccaggio tutore	-
---------	--------------------------	---

Regolazione della lunghezza: da 48 cm a 63,5 cm

* Circonferenza massima della coscia: 71 cm

DJO Italia Srl | Via Leonardo da Vinci 97 | 20090 Trezzano sul Naviglio | Milano | ITALIA

www.DJOglobal.it



Together in Motion™