




Performance & Lifestyle

## Attelle Post-opératoire X-Act ROM Genou

Une protection haute précision.

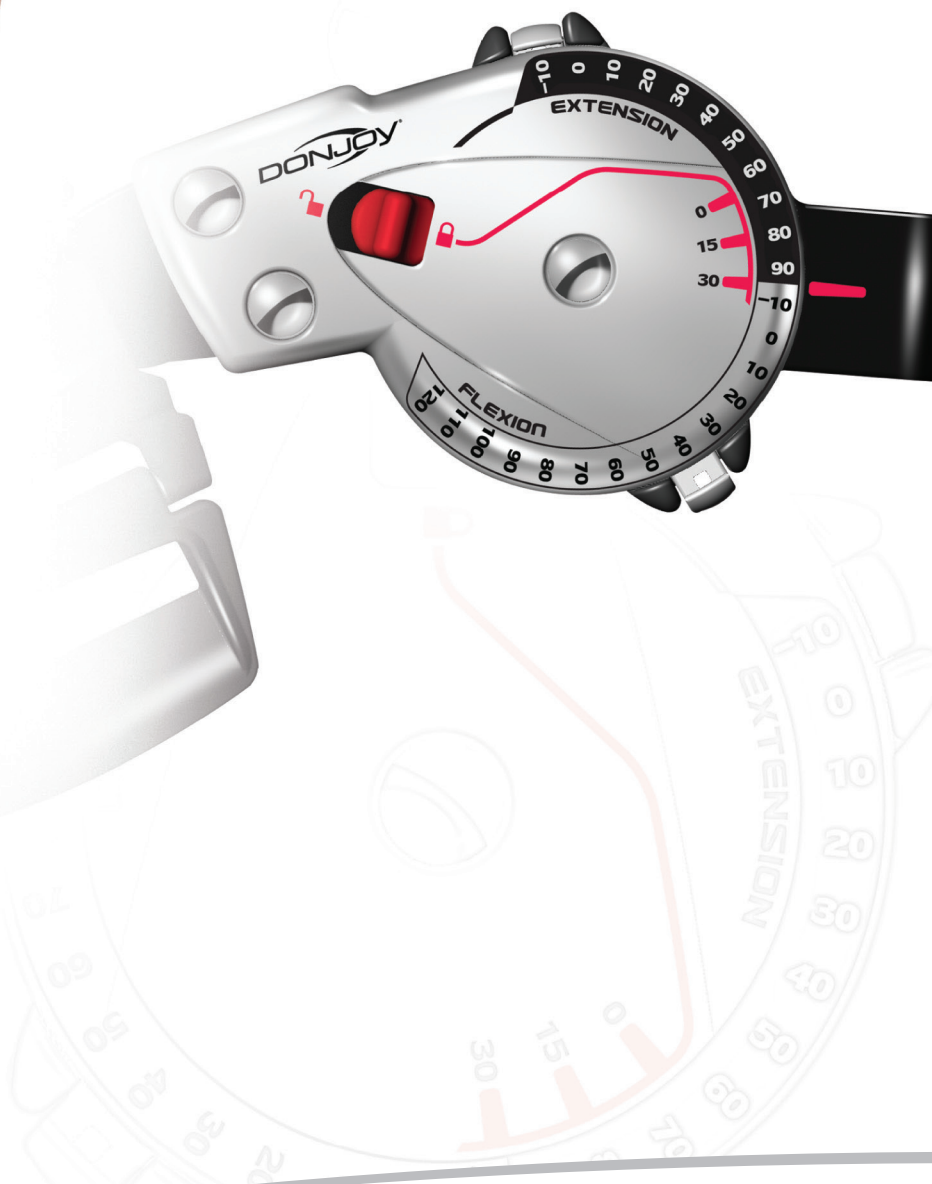

La nouvelle attelle post-opératoire X-Act ROM Genou DonJoy offre un niveau inégalé de confort, d'adaptabilité et de fonctionnalité, et garantit des conditions de guérison optimales après une intervention chirurgicale.

### Indications

Immobilisation et protection de l'amplitude de mouvement suite à une intervention chirurgicale sur le LCA, LCP, LLI ou LLE, ou le LCM, ou suite à une réparation du ménisque.

### Des articulations en aluminium durables pour une protection haute précision


- Les nouvelles articulations en aluminium, durables et au design épuré, offrent une protection haute précision et un contrôle de l'amplitude de mouvement par incréments de 10°.
  - Extension de -10° à 90°
  - Flexion de -10° à 120°
  - Verrouillage rapide à 0°, 15° et 30°

### Nouveautés

Les boucles à fixation rapide pivotent autour de la jambe pour un ajustement optimal en un temps record.



Clips de fermeture pour un enclenchement rapide.

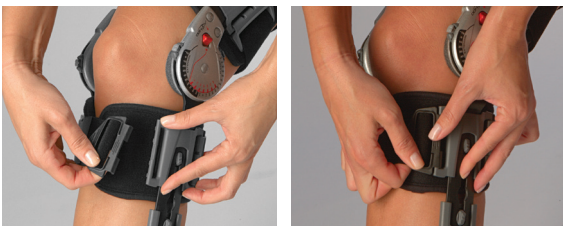

### Des boucles à fixation rapide pour une mise en place facile

- Les boucles pivotantes à fixation rapide s'adaptent parfaitement et en un temps record au contour de la jambe.





X-Act ROM Genou est l'attelle post-opératoire la plus légère de DonJoy. Simple et rapide à poser, elle offre confort et ajustement optimal, et garantit une protection haute précision pendant la phase de guérison.

## Système Tele-Fit pour un ajustement optimal

- Taille unique: le système Tele-Fit permet un réglage indépendant de la longueur des montants et de la position des sangles proximales et distales.
- Réglage télescopique de 48 cm à 63,5 cm pour s'adapter à la plupart des patients.
- Les manchons coulissants sont individuellement repositionnables afin d'éviter de placer les sangles sur des sites sensibles (pansements chirurgicaux, par exemple).

## Des coussinets en mousse auto-adhésive pour une meilleure stabilité

- Les coussinets en mousse auto-adhésive sont uniques et constituent des points de contact auto-adhérents entre la jambe et l'attelle afin d'éviter que celle-ci ne glisse.





## Attelle X-Act ROM Genou

INFORMATIONS DE COMMANDE			
DÉSIGNATION	TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
Attelle X-Act ROM Genou	Universelle*	11-2151-9	34010 <b>53650544</b>
ACCESSOIRES			
Kit de blocage	-	25-6755	34010 <b>53650315</b>

Réglage de la longueur : 48 cm à 63,5 cm  
\*Circonférence maximale de la cuisse : 71 cm

DJO France S.A.S. | Centre Européen de Fret | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | FRANCE

Tél : +33 (0)5 59 52 86 90 Fax : +33 (0)5 59 52 86 91 Email : [sce.cial@DJOglobal.com](mailto:sce.cial@DJOglobal.com)

[www.DJOglobal.fr](http://www.DJOglobal.fr)



*Together in Motion™*

\* "Ensemble, en mouvement"